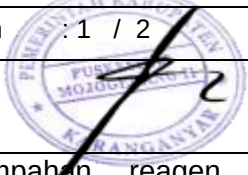


	PENANGANAN TUMPAHAN REAGEN DAN PAJANAN PETUGAS		
	SOP	No.Dokumen : 067/SOP/064.5.8/III/2023	
		No.Revisi : 01	
		Tgl Terbit : 20 Maret 2023	
UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II			Sri Mulyani, S.ST, MH NIP. 197407021993022001
1. Pengertian	Penanganan tumpahan reagen adalah penatalaksanaan penanganan ceceran / tumpahan reagen di UPT Puskesmas Mojogedang II.		
2. Tujuan	Sebagai penerapan langkah-langkah untuk penanganan tumpahan reagen.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mojogedang II No 449.1/052.5.8/III/2023 tentang Pelayanan Laboratorium.		
4. Referensi	Pedoman PPI		
5. Prosedur	- Petugas menyiapkan alat dan bahan Spill kit - Petugas memasang tanda segitiga yang bertuliskan "awas lantai basah" - Petugas memakai APD lengkap - Petugas mengambil dan menggunakan penjepit atau pinset kemudian membersihkan menggunakan sapu dan serok lalu memasukkan ke dalam botol, bila ada pecahan kaca / ampulan obat - Petugas mengambil dengan menggunakan spuit kemudian memasukan kedalam botol berisi air, tutup botol dengan rapat dan dilakban Bila tumpahan B3 (air raksa) - Petugas menutup dengan koran /kertas tissue /underpad yang mudah menyerap, raup dengan kedua tangan, lalu buang ke plastik kuning bila ada muntahan /darah - Petugas membersihkannya dengan lap pel yang mudah menyerap yang sudah dibasahi dengan chlorine 0,5 %, membuang lap ke plastic kuning - Petugas membuang lap ke plastic kuning bila tumpahan berupa obat atau cairan B3, petugas membersihkan dengan lap yang mudah menyerap air yang sudah dibasahi dengan detergen cair - Petugas membersihkan /mengepel seperti biasa - Petugas membereskan alat-alat dan melepas APD		
6. Diagram Alir	-		
7. Unit terkait	Ruang Laboratorium		

Rekam Histori

No	Halaman	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1.	1	Nomor dokumen	Menjadi nomor SOP yang sekarang	20 Maret 2023
2.	1	Kebijakan	Menyesuaikan SK yang sekarang	20 Maret 2023